



Michibiki PLUS

Michibiki PLUS

血管内処置診断用マイクロカテーテル

販売名: ミチビキ
一般的名称: 中心循環系マイクロカテーテル
医療機器承認番号: 22000BZX01455000
高度管理医療機器

※製品改良のため、記載内容の一部を予告なく変更することがあります。
※使用前に製品の添付文書をよく読み、記載されている説明に従って使用してください。

製造販売元




ハナコメディカル株式会社
Hanaco *medical* CO.,LTD.

本社 〒330-0073 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目24番11号
TEL 048-881-4101(代) FAX 048-881-5875
URL: <http://www.hanacomical.co.jp/>
E-mail: eigyoun@hanacomical.co.jp



ハナコメディカル株式会社
Hanaco *medical* CO.,LTD.

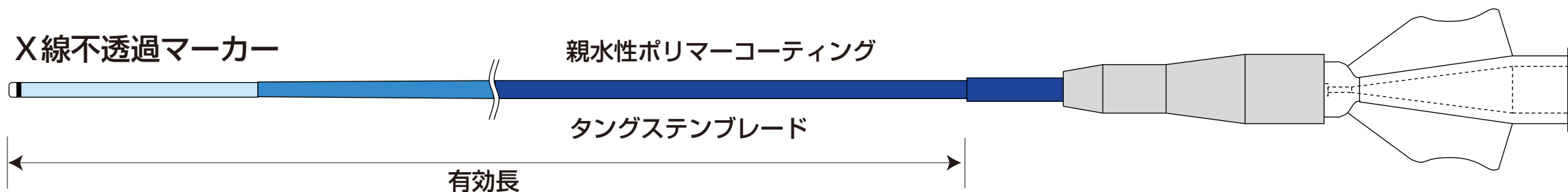

最大耐圧 ; 1000PSI (6.90MPa)

カテーテル先端部から 80cm (有効長 150cm の場合は 130cm) 部分まで親水性ポリマーコーティングが施されています。

Michibiki PLUS

特徴

操作性

カテーテル表面に親水性ポリマーコートをし、親カテーテル内や末梢血管でのスムーズな操作が可能です。
また、硬度の異なる多段階の材質をバランス良く組み合わせる事によりカテーテル先端部へ手元の操作が良く伝わります。

視認性

先端部にプラチナマーカを採用。また、タングステンブレードを採用し高いカテーテル視認性を実現しました。
(Highflow タイプはステンレスブレードを採用)

仕様

- 様々な症例に適応可能なスペックを用意しました。()内は先端部外径。
- 末梢血管への対応 : 2 種類の Selective タイプ (1.8Fr/2.0Fr)
 - 高流量対応 : Highflow タイプ (2.8Fr)
 - 3Fr システム対応 : 3Fr 用 Selective タイプ (2.0Fr)
 - デタッチャブルコイル対応 : ダブルマーカ (2.0Fr)

Selective 1.8Fr/2.7Fr

保険医療材料請求分類 : マイクロカテ・OSB

品番	外径		最小内径 (先端部)	最大内径 (手元部)	有効長	適合最大 ガイドワイヤー径	先端形状	マーカ数	JAN コード
	先端部	手元部							
MP-S1811-A					110cm	0.016"	ストレート	1	4543043109065
MP-S1813-A	1.8Fr	2.7Fr	0.017"	0.023"	130cm				4543043109089
MP-S1815-A					150cm				4543043109102

Selective 2.0Fr/2.7Fr

保険医療材料請求分類 : マイクロカテ・OSB

品番	外径		最小内径 (先端部)	最大内径 (手元部)	有効長	適合最大 ガイドワイヤー径	先端形状	マーカ数	JAN コード
	先端部	手元部							
MP-S2011-A					110cm	0.018"	ストレート	1	4543043107870
MP-S2013-A	2.0Fr	2.7Fr	0.020"	0.023"	130cm				4543043107894
MP-S2015-A					150cm				4543043107917

Highflow 2.8Fr/2.8Fr

保険医療材料請求分類 : マイクロカテ・OZ

品番	外径		最小内径 (先端部)	最大内径 (手元部)	有効長	適合最大 ガイドワイヤー径	先端形状	マーカ数	JAN コード
	先端部	手元部							
MH2711-E					110cm	0.021"	ストレート	1	4543043094156
MH2713-E	2.8Fr	2.8Fr	0.028"	0.028"	130cm				4543043094170
MH2715-E					150cm				4543043098550

3Fr システム対応 2.0Fr/2.4Fr

保険医療材料請求分類 : マイクロカテ・OSB

品番	外径		最小内径 (先端部)	最大内径 (手元部)	有効長	適合最大 ガイドワイヤー径	先端形状	マーカ数	JAN コード
	先端部	手元部							
MP3F-S2011-A					110cm	0.018"	ストレート	1	4543043108990
MP3F-S2013-A	2.0Fr	2.4Fr	0.020"	0.022"	130cm				4543043109010
MP3F-S2015-A					150cm				4543043109041

ダブルマーカ 2.0Fr/2.7Fr (マーカ間 3cm)

保険医療材料請求分類 : マイクロカテ・O コイル

品番	外径		最小内径 (先端部)	最大内径 (手元部)	有効長	適合最大 ガイドワイヤー径	先端形状	マーカ数	JAN コード
	先端部	手元部							
MP-DM2012-A					120cm	0.018"	ストレート	2	4543043108013
MP-DM2015-A	2.0Fr	2.7Fr	0.020"	0.023"	150cm				4543043108020

※アングル形状も取り揃えております。

※付属品はシリンジ 2 本がセットとなっております。Y コネクター等の付属品につきましては弊社営業担当者へお問い合わせ下さい。